

# Accesorios inalámbricos de Phonak Audéo™ B-Direct

Información del producto



Phonak presenta Audéo™ B-Direct, una nueva extensión de la exitosa familia de audífonos RIC para pérdida auditiva de leve a severa. Gracias a la tecnología Phonak Belong™, Phonak Audéo B-Direct amplía el alcance de la gama de Phonak con una solución orientada a las personas que buscan una conectividad directa. Destinada a simplificar la vida de aún más consumidores, la solución Audéo B-Direct es el primer punto de entrada en el segmento de conectividad directa con compatibilidad universal. Los nuevos audífonos se conectan fácilmente a cualquier móvil\* y televisión.

\*con tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.2 y la mayoría de teléfonos antiguos con Bluetooth

# TV Connector: el dispositivo de transmisión fácil de utilizar para TV y música



**TV Connector** es la interfaz Plug and Play para la televisión y otras fuentes de audio compatible con la conectividad directa para audífonos Phonak Audéo B-Direct. El objetivo de su diseño es simplificar su configuración y uso; además, ofrece un sonido en estéreo con una calidad superior mediante la tecnología AirStream™. TV Connector puede transmitir señales de audio a una distancia de hasta 15 metros a una cantidad ilimitada de oyentes conectados al mismo tiempo.


## Descripción general de las funciones

- Transmisión a ambos audífonos en sonido estéreo
- Tecnología AirStream para obtener una mejor calidad sonora, la menor latencia de transmisión y un método de conexión más sencillo
- Un solo clic para conectar todos los audífonos compatibles dentro del radio de alcance sin necesidad de gestos en el audífono
- Transmisión simultánea a una cantidad ilimitada de usuarios al mismo tiempo
- Para una mayor discreción, puede montarse detrás de la televisión

## Compatibilidad

- TV Connector es compatible únicamente con Audéo B-Direct. El resto de audífonos inalámbricos son incompatibles.

## Utilización

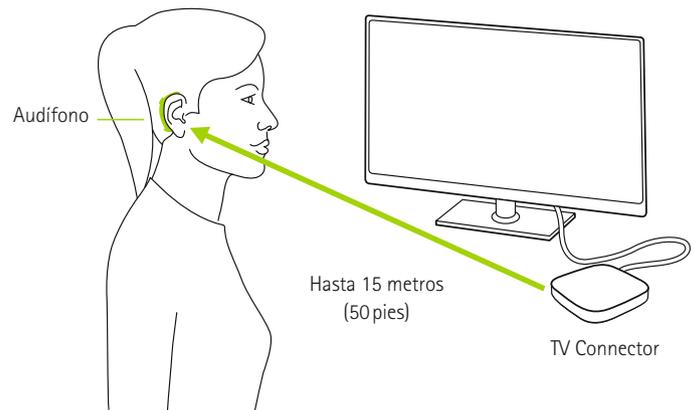

Para ver vídeos sobre cómo utilizar y configurar TV Connector, visite [www.phonakpro.es/TVConnector](http://www.phonakpro.es/TVConnector)

## Datos técnicos



- 1 Botón de conexión en un solo clic
- 2 Indicador luminoso (LED)
- 3 Enchufe de alimentación micro USB
- 4 Conector de audio para Toslink (óptica digital) o cable de clavija (analógica) de 3,5 mm

Tamaño de caja pequeño (L.: 63 mm × an.: 63 mm × al.:12 mm)

# Phonak Remote: la aplicación de mando a distancia simplificada



**Phonak Remote** es la forma cómoda de controlar a distancia la funcionalidad básica y compatibilizar la conectividad directa a los audífonos. La aplicación está diseñada para mejorar la capacidad de uso para una mayor comodidad al utilizar un mando a distancia. Se trata de un fácil control de las funciones del audífono visualizadas en el teléfono inteligente sin la necesidad de un dispositivo intermedio en el cuerpo.

## Descripción general de las funciones

- Ajuste de volumen de los audífonos en ambos lados o cada uno por separado
- Lista de programas con la selección directa de programas de audífonos disponibles
- Posibilidad de personalizar el nombre de los programas de audífonos disponibles en la aplicación
- Selección de fuentes de audio disponibles conectadas a los audífonos
- Fácil ajuste de la función de equilibrio ambiental del audífono durante una transmisión desde una fuente de audio
- Ajuste independiente del nivel de volumen de ruido Tinnitus, si está disponible en el audífono
- Comprobación del tiempo de uso medio de los audífonos conectados en la aplicación


Para ver vídeos sobre cómo utilizar y configurar la aplicación Phonak Remote app en su teléfono, visite [www.phonakpro.es/remoteapp](http://www.phonakpro.es/remoteapp)



Ajuste de volumen en cada lado



Equilibrio ambiental de una transmisión de audio

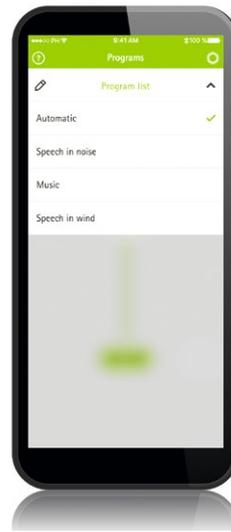

Selección y personalización de programas



Ajuste de volumen de ruido Tinnitus

## Compatibilidad

- La aplicación Phonak Remote app es compatible únicamente con Phonak Audéo B-Direct. El resto de audífonos inalámbricos son incompatibles.
- La aplicación Phonak Remote app puede utilizarse en teléfonos iPhone de Apple con iOS 10.2 o superior y en teléfonos inteligentes con Google Android 5 o superior.

---

# Life is on

En Phonak, creemos que una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. Durante más de 70 años hemos permanecido fieles a nuestro objetivo y, para ello, hemos desarrollado soluciones auditivas avanzadas que pueden mejorar la vida social y emocional de las personas. **Life is on.**

[www.phonak.es](http://www.phonak.es)